

# **Estufas** **de Esterilización** **Automática Digital**




**EcoLogic**

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Programación de Tiempo y Temperatura
- Control Digital PID EcoLogic con Autotuning
- Doble visor de temperatura Interna y Parámetro programado
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Rango de temperatura de 50 a 200°C
- Indicadores lumínicos de Resistencia, Alarma y Autotuning
- Exactitud: al grado centígrado
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía a 2 años gratuita
- Accesorios: 1 estante tipo rejilla regulable (3 posiciones)



Medidas Internas  
**33 x 20 x 20**

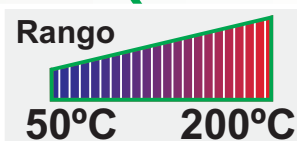

Estufa de Esterilización  
Automática Digital

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### Interior

Frente x Alto x Fondo en cm	33 x 20 x 20
Volumen Interno (en Litros)	13

### Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa	44 x 31 x 44
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	48 x 36 x 48

### Otros

Consumo Wats	660
Peso en Kg Neto	11
Peso en Kg con Embalaje	12

- 😊 Alta performance para uso continuo
- 😊 Exclusivo Control Digital EcoLogic
- 😊 Fácil manejo del Control Digital
- 😊 Autotuning optimizado de fábrica
- 😊 Bajo Consumo
- 😊 Doble Garantía
- 😊 Service gratuito de por vida


[www.sanjor.com.ar](http://www.sanjor.com.ar)

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Programación de Tiempo y Temperatura
- Control Digital PID EcoLogic con Autotuning
- Doble visor de temperatura Interna y Parámetro programado
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Rango de temperatura de 50 a 200°C
- Indicadores lumínicos de Resistencia, Alarma y Autotuning
- Exactitud: al grado centígrado
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía a 2 años gratuita
- Accesorios: 1 estante tipo rejilla regulable (2 posiciones)



Medidas Internas  
**45 x 25 x 25**

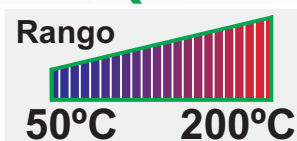

Estufa de Esterilización  
Automática Digital

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### Interior

Frente x Alto x Fondo en cm	45 x 25 x 25
Volumen Interno (en Litros)	28

### Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa	56 x 35 x 49
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	60 x 40 x 54

### Otros

Consumo Wats	880
Peso en Kg Neto	16
Peso en Kg con Embalaje	17

- 😊 Alta performance para uso continuo
- 😊 Exclusivo Control Digital EcoLogic
- 😊 Fácil manejo del Control Digital
- 😊 Autotuning optimizado de fábrica
- 😊 Bajo Consumo
- 😊 Doble Garantía
- 😊 Service gratuito de por vida


[www.sanjor.com.ar](http://www.sanjor.com.ar)

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Programación de Tiempo y Temperatura
- Control Digital PID EcoLogic con Autotuning
- Doble visor de temperatura Interna y Parámetro programado
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Rango de temperatura de 50 a 200°C
- Indicadores lumínicos de Resistencia, Alarma y Autotuning
- Exactitud: al grado centígrado
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía a 2 años gratuita
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (3 posiciones)



Medidas Internas  
**45 x 30 x 30**

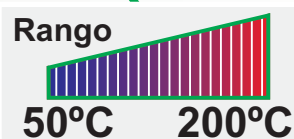

Estufa de Esterilización  
Automática Digital

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Interior</b>	
Frente x Alto x Fondo en cm	45 x 30 x 30
Volumen Interno (en Litros)	41
<b>Exterior</b>	
Frente x Fondo x Alto de Estufa	56 x 40 x 54
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	60 x 45 x 59
<b>Otros</b>	
Consumo Wats	990
Peso en Kg Neto	19
Peso en Kg con Embalaje	21

- 😊 Alta performance para uso continuo
- 😊 Exclusivo Control Digital EcoLogic
- 😊 Fácil manejo del Control Digital
- 😊 Autotuning optimizado de fábrica
- 😊 Bajo Consumo
- 😊 Doble Garantía
- 😊 Service gratuito de por vida


[www.sanjour.com.ar](http://www.sanjour.com.ar)

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Programación de Tiempo y Temperatura
- Control Digital PID EcoLogic con Autotuning
- Doble visor de temperatura Interna y Parámetro programado
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Rango de temperatura de 50 a 200°C
- Indicadores lumínicos de Resistencia, Alarma y Autotuning
- Exactitud: al grado centígrado
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía a 2 años gratuita
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)



Medidas Internas  
**60 x 40 x 40**

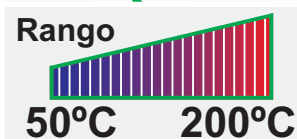

Estufa de Esterilización  
Automática Digital

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### Interior

Frente x Alto x Fondo en cm	60 x 40 x 40
Volumen Interno (en Litros)	96

### Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa	74 x 53 x 72
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	82 x 60 x 80

### Otros

Consumo Wats	1430
Peso en Kg Neto	36
Peso en Kg con Embalaje	38

- 😊 Alta performance para uso continuo
- 😊 Exclusivo Control Digital EcoLogic
- 😊 Fácil manejo del Control Digital
- 😊 Autotuning optimizado de fábrica
- 😊 Bajo Consumo
- 😊 Doble Garantía
- 😊 Service gratuito de por vida


[www.sanjour.com.ar](http://www.sanjour.com.ar)

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Programación de Tiempo y Temperatura
- Control Digital PID EcoLogic con Autotuning
- Doble visor de temperatura Interna y Parámetro programado
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Rango de temperatura de 50 a 200°C
- Indicadores lumínicos de Resistencia, Alarma y Autotuning
- Exactitud: al grado centígrado
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía a 2 años gratuita
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (6 posiciones)



Medidas Internas  
**70 x 50 x 50**

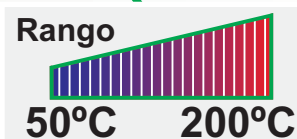

Estufa de Esterilización  
Automática Digital

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Interior</b>	
Frente x Alto x Fondo en cm	70 x 50 x 50
Volumen Interno (en Litros)	175
<b>Exterior</b>	
Frente x Fondo x Alto de Estufa	86 x 62 x 87
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	94 x 68 x 91
<b>Otros</b>	
Consumo Wats	1760
Peso en Kg Neto	53
Peso en Kg con Embalaje	74

- ☺ Alta performance para uso continuo
- ☺ Exclusivo Control Digital EcoLogic
- ☺ Fácil manejo del Control Digital
- ☺ Autotuning optimizado de fábrica
- ☺ Bajo Consumo
- ☺ Doble Garantía
- ☺ Service gratuito de por vida

[www.sanjor.com.ar](http://www.sanjor.com.ar)

## FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL ECOLOGIC


El Controlador **PID EcoLogic** de "SAN JOR" es un nuevo y exclusivo sistema de control de temperatura, diseñado pensando en el fácil manejo del mismo. El control mantiene en memoria la última programación y en los sucesivos ciclos tan solo con encender la Estufa se inicia un nuevo ciclo de esterilización y al terminar da el aviso de finalización para luego simplemente pulsar la tecla de apagado.

Teniendo niveles de programación que incluso se puede bloquear para evitar cambios de programación por toques accidentales de sus teclas.

Además se incorpora una variable específica programada de fábrica, configurada especialmente para el diseño de resistencias.

La Serie SAD es de bajo consumo lo que implica un ahorro energético y brinda un cuidado al medioambiente desde el inicio de la fabricación hasta el uso de la Estufa.


Por ser un desarrollo propio, no se encuentra en el mercado Controlador de temperatura de similares características.

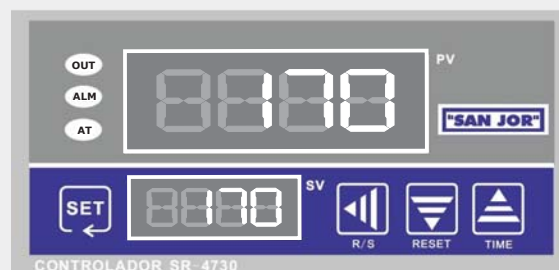

### Ciclo de Esterilización en Tiempo y Temperatura

El tiempo programado comienza a decrecer cuando la Estufa alcanza la temperatura programada

- A** Temperatura interior inicial
- B** Alcanza temperatura programada
- C** Finalización de ciclo programado

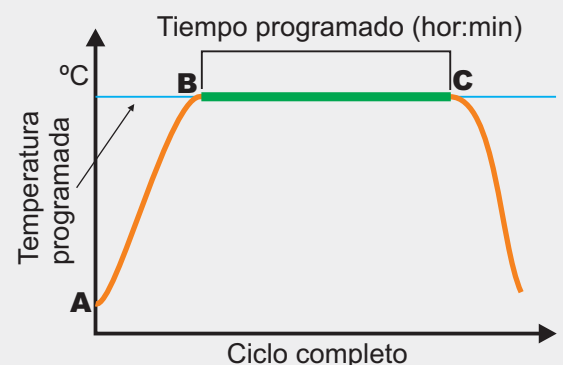

**TABLA COMPARATIVA**

Modelos de Estufas	 SE33AD	 SE45AD	 SE43AD	 SE60AD	 SE70AD
<b>Interior</b>					
Acero Inoxidable 304 18/8	●	●	●	●	●
Frente x Alto x Fondo en cm	33 x 20 x 20	45 x 25 x 25	45 x 30 x 30	60 x 40 x 40	70 x 50 x 50
Volumen Interno (en Litros)	13	28	41	96	175
<b>Exterior</b>					
Hierro con pintura horneada	●	●	●	●	●
Frente x Fondo x Alto de Estufa	44 x 34 x 43	56 x 38 x 49	56 x 43 x 54	74 x 53 x 77	86 x 62 x 87
Frente x Fondo x Alto c/Embalaje	48 x 36 x 48	60 x 40 x 54	60 x 45 x 59	82 x 60 x 80	94 x 68 x 91
Aireador en la parte superior	●	●	●	●	●
Puertas con cierre a falleba	1	1	1	2	2
<b>Control de Temperatura</b>					
Digital con Doble visor	●	●	●	●	●
PID con Autotuning	●	●	●	●	●
Ciclo automático	●	●	●	●	●
Indicadores Alarma y Autotuning	●	●	●	●	●
Control de Tiempo y Temperatura	●	●	●	●	●
Indicador de Resistencia	●	●	●	●	●
Exactitud	1°C	1°C	1°C	1°C	1°C
Uniformidad	0,6%	0,7%	0,7%	0,8%	1%
Rango de Temperatura	50°C a 200°C	50°C a 200°C	50°C a 200°C	50°C a 200°C	50°C a 200°C
<b>Otros</b>					
Estantes tipo rejilla	1	1	2	2	2
Posiciones de los Estantes	3	2	3	5	6
Conexión 220V~ Opcional 110V~	●	●	●	●	●
Consumo Wats	660	880	990	1430	1760
Peso en Kg Neto	11	16	19	36	53
Peso en Kg con Embalaje	12	17	21	38	74
Garantía 1 año	●	●	●	●	●
Service gratuito de por vida	●	●	●	●	●
Extensión de garantía gratuita	●	●	●	●	●

**Distribuidor Oficial:**