


Modelo SE60T

CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de Resistencia y funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Rango de temperatura de 30°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura
- Uniformidad: +- 1,5% del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía (en la Web)
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)



Medidas Internas
60 x 40 x 40

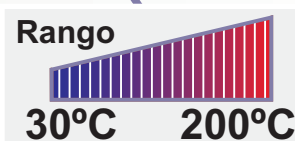

Estufa de Esterilización
Semiautomática

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm	60 x 40 x 40
Volumen Interno (en Litros)	96

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa	74 x 53 x 72
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	82 x 60 x 80

Otros

Consumo Wats	1430
Peso en Kg Neto	36
Peso en Kg con Embalaje	38

- ☺ Alta performance para uso continuo
- ☺ Bajo Consumo
- ☺ Doble Garantía
- ☺ Service gratuito de por vida

www.sanjour.com.ar