


ESTERILIZACIÓN

Modelo SE33T

"SAN JOR"



Rango de Temperatura

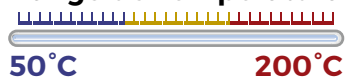

Medidas Internas

33 x 20 x 20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 33 x 20 x 20
Volumen Interno (en Litros) 13

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 44 x 31 x 51
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 50 x 37 x 53

Otros

Consumo en Watts 660
Peso en Kg Neto 11
Peso en Kg con Embalaje 12

Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro digital
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Indicadores lumínicos de resistencia y funcionamiento
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Uniformidad $\pm 1,5\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 2 años con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 1 estante tipo rejilla regulable (3 posiciones)



Alta performance para uso continuo



Bajo consumo



Doble Garantía



Service gratuito de por vida

Especialistas en fabricación de Estufas



sanjor.com.ar